

FATIGUÉ ?

de jouer
à cache-cache.



SCANflex



- RAPIDE
- FIABLE
- ERGONOMIQUE
- FACILE D'UTILISATION

Détecte et lit **rapidement et efficacement**
TOUTES
les puces électroniques






ScanFlex AFX-100 : Un nouveau lecteur de puces électroniques développé spécifiquement pour l'identification des animaux de compagnie, offrant des bénéfices uniques.

Une détection rapide et efficace de la puce électronique

- Une double antenne omnidirectionnelle unique, combinant une bobine de ferrite et à air, avec un angle d'inclinaison spécifique.

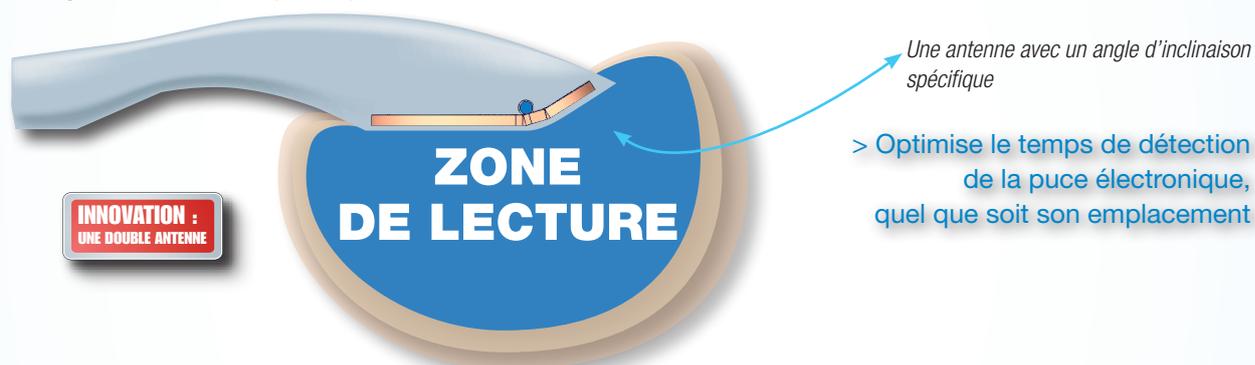

- Le seul lecteur possédant un **vibrateur tactile** associé à un beeper.

La capacité à lire tous types de puces électroniques

- ScanFlex AFX-100 peut détecter et lire tous types de puces électroniques, quel que soit le pays où l'animal a été identifié.

	FDX-A FECEVA	FDX-B	HDX	TROVAN	AVID Encrypted
SCANflex AFX-100	✓	✓	✓	✓	✓ (détecté)

- Peut mettre en mémoire jusqu'à **2000 numéros d'identification**, chacun associé à une heure et une date de lecture
- **Interface Bluetooth®**
- Une batterie rechargeable, fournissant jusqu'à 15 heures d'autonomie

ScanFlex AFX-100: Conçu pour plus de fonctionnalité

- Ergonomique, plus compacte et plus léger que certains lecteurs actuellement commercialisés sur le marché
- Manipulation à la fois pour droitiers et gauchers
- Dragone fournie
- Kit voiture disponible